



# Sio Gilu Spray do Nosa **KIDS**

Sio Gilu Spray do Nosa KIDS to wyrób medyczny, przeznaczony do codziennego stosowania, który przyczynia się do ochrony przed infekcjami wirusowymi, a także przyczynia się do łagodzenia objawów infekcji wirusowych takich jak: grypa wywołana wirusami grypy typu B i C, przebiegnięcie wywołane przez koronawirusy.

Wyrób może być stosowany cztery razy dziennie, zgodnie ze sposobem użycia opisanym w instrukcji używania w punkcie „sposób użycia”, zarówno profilaktycznie jak i wspomagająco w trwających infekcjach wirusowych\*.

Wyrób może być stosowany u dorosłych oraz u dzieci po pierwszym roku życia.

## **Składniki odpowiadające za działanie wyrobu:**

- Jota-karagen, hialuronian sodu, ektoina

## **Składniki pomocnicze:**

- glikol propylenowy, kwas cytrynowy, wodorofosforan sodu, fosforan sodu, woda oraz substancje konserwujące

## **WSKAZANIA DO UŻYWANIA WYROBU MEDYCZNEGO**

### **SIO GILU SPRAY DO NOSA KIDS**

#### **1. Wsparcie ochrony przed wnikaniem i rozprzestrzenianiem się wirusów\***

- Wyrób przyczynia się do ochrony przed wnikaniem i rozprzestrzenianiem się wirusów\*. Może pomagać ograniczać wnikanie wirusów do komórek błony śluzowej nosa, co w konsekwencji może przekładać się na ograniczenie możliwości rozwinięcia się infekcji wirusowych górnych dróg oddechowych wywołanych wirusami grypy i koronawirusami, mogącymi powodować m.in. grypę lub przebiegnięcie.
- Wyrób przyczynia się do ochrony przed rozprzestrzenianiem się wirusów, czyli do ograniczenia transmisji z osób chorych z objawami lub zakażonych bezobjawowych na inne osoby.

Wyrób można używać profilaktycznie, w celu wsparcia prawidłowych fizjologicznych funkcji błony śluzowej nosa.

#### **2. Łagodzenie objawów infekcji wirusowej\* i wspomaganie leczenia**

- Wyrób może łagodzić objawy infekcji wirusowych\* górnych dróg oddechowych takich jak m.in. zapalenie błony śluzowej nosa i może wspomagać ich leczenie poprzez łagodzenie objawów stanów zapalnych błony śluzowej nosa takich jak nieżyt nosa, katar, podrażnienie.
- Może działać nawilżająco i łagodząco dzięki zawartości hialuronianu sodu oraz ektoiny i przez to przyczynia się do ochrony przed stanami suchości oraz przed podrażnieniami błony śluzowej nosa także przez czynniki środowiskowe.
- Może wspomagać leczenie ostrego lub przewlekłego zaostrażającego się zapalenia zatok przynosowych, umożliwiając udrożnienie ujścia zatok.

#### **3. Skracanie czasu trwania choroby**

- Wyrób może skracać czas trwania infekcji wirusowej.
- Może zmniejszać prawdopodobieństwo nadkażenia bakteryjnego

## **MECHANIZM DZIAŁANIA**

Błona śluzowa nosa tworzy pierwszą fizyczną barierę ochronną organizmu i pierwszą linię obrony układu odpornościowego. Dzięki szczególnej budowie i produkcji śluzu oczyszcza drogi oddechowe z wdychanych szkodliwych dla zdrowia substancji oraz zapobiega wnikaniu i rozprzestrzenianiu się wirusów, bakterii i grzybów.

Powietrze, które wdychamy przez nos, zostaje oczyszczone, nawilżone i ocieplone, co jest kluczowe dla pracy całego układu oddechowego. Błona śluzowa nosa pełni swoją ochronną funkcję, jednak tylko wtedy, gdy jest w dobrej fizjologicznej kondycji, czyli gdy jest dobrze nawilżona. Zbyt suche i przegrzane powietrze, cząsteczki zanieczyszczeń, toksyczne opary we wdychanym powietrzu oraz miejscowe stosowanie preparatów drażniących nos podrażniają błonę śluzową nosa i wysuszają ją. Szczególnie narażone na niekorzystne czynniki środowiskowe są osoby starsze, u których występuje stopniowy zanik błony śluzowej (tzw. suchy nos), co prowadzi do uszkodzenia błony śluzowej nosa i sprzyja rozwojowi zakażeń wirusowych i bakteryjnych. Uszkodzona błona śluzowa nosa nie spełnia swojej podstawowej funkcji i zwiększa ryzyko wystąpienia ostrych i przewlekłych chorób zakaźnych, w tym częstych sezonowych infekcji wirusowych nosa lub gardła.

W warunkach uszkodzonej błony śluzowej jamy nosa może dojść do zakażenia różnymi rodzajami wirusów, mogącymi wywołać m.in. grypę lub przebiegnięcie. Wirus mając odpowiednie warunki, wnika do komórek gospodarza i namnaża się, co prowadzi do wystąpienia objawów choroby. Można jednak wspierać ochronę przed zakażeniem poprzez codzienną profilaktykę.

Po aplikacji wyrobu, zgodnie ze sposobem używania, następuje rozproszenie wyrobu na błonie śluzowej nosa i utworzenie warstwy ochronnej, która wspomaga naturalną barierowość błony śluzowej i przyczynia się do ograniczenia wnikania patogenów do organizmu a poprzez ten fakt przyczynia się do ograniczenia namnażania patogenów w organizmie.

Utworzona warstwa ochronna jako mechaniczna bariera utrzymuje się w pełni do kilkunastu minut od aplikacji wyrobu, po tym czasie stopniowo ulega naturalnym procesom fizjologicznym nosa jak system oczyszczania śluzowo-rzęskowego, czyli jest usuwana.

Codziennie stosowanie produktu, przyczynia się do poprawy kondycji błony śluzowej nosa. Utworzona warstwa ochronna działa nawilżająco i łagodząco dzięki zawartości hialuronianu sodu i ektoiny, przez co przyczynia się do ochrony przed stanami suchości oraz przed podrażnieniami błony śluzowej nosa przez czynniki środowiskowe. Wzmocniona i odpowiednio nawilżona błona śluzowa może także lepiej pełnić swoje funkcje fizjologiczne i ochronne.

Sio Gilu Spray do Nosa KIDS to żel do nosa, który przyczynia się do ochrony przed infekcjami wirusowymi\*, pomaga łagodzić objawy infekcji wirusowych\*. Może być stosowany profilaktycznie, w celu wsparcia prawidłowych fizjologicznych funkcji błony śluzowej nosa.


Substancje wchodzące w skład Sio Gilu Spray do Nosa KIDS tj. jota-karagen, hialuronian sodu oraz ektoina były przedmiotem badań in vitro i in vivo oraz badań klinicznych.

## SPOSÓB UŻYCIA

Przed aplikacją należy umyć ręce. Przed pierwszym użyciem nowej butelki, po zdjęciu nasadki, nacisnąć dozownik ok. 5-krotnie, aż do pojawienia się żelu.

Trzymając głowę w pozycji pionowej (nie odchylając jej do tyłu) należy umieścić końcówkę aplikatora w otworze nosowym, nie blokując przy tym całkowicie jego światła. Skierować końcówkę dozownika w stronę przeciwną do przegrody nosa (ściana pomiędzy otworami nosowymi), czyli w prawym otworze nosowym w kierunku prawego oka, a w lewym w kierunku lewego oka. Nacisnąć dozownik, co spowoduje rozproszenie dawki wyrobu w jamie nosowej. Po podaniu dawki należy ścisnąć płatki nosa palcami i masować celem rozproszenia żelu.

**DOBRE**

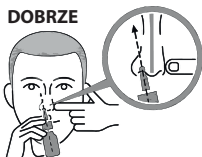

**ŻŁE**



Zalecana dawka to 1 dawka żelu do każdego otworu nosowego w odstępach 4-5 godzin między aplikacjami.

Nie czyścić nosa przez około 5-10 minut po aplikacji wyrobu. Czas pomiędzy aplikacjami nie jest równoważny z czasem działania wyrobu.

Opakowanie 20 ml zawiera 200 dawek produktu.

Atomizer po zdjęciu z butelki można umyć wodą z mydłem, optukać kilkakrotnie, osuszyć i ponownie użytkować po założeniu na butelkę z wyrobem.

Wyrób jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci po ukończonym pierwszym roku życia.

W przypadku wystąpienia objawów dyskomfortu należy przerwać stosowanie wyrobu.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ze względów sanitarno-epidemiologicznych jedno opakowanie należy przeznaczyć dla jednego użytkownika.

Wyrób medyczny przeznaczony wyłącznie do stosowania do nosa, na błonę śluzową nosa – nie spożywać wyrobu.

U dzieci w wieku poniżej 12 lat stosować pod nadzorem osoby dorosłej.

Wyrób medyczny należy używać zgodnie z instrukcją używania.

## ZASTOSOWANIE WIĘKSZEJ NIŻ ZALECANA DAWKI WYROBU MEDYCZNEGO

Większa dawka wyrobu medycznego nie stanowi zagrożenia. Należy przestrzegać zalecanego sposobu użycia.

## PRZECIWWSKAZANIA

- Nie stosować w przypadku uczulenia na zawarte w wyrobie medycznym składniki.
- Nie stosować, jeśli po zastosowaniu produktu wystąpią objawy swędzenia lub pieczenia, co może świadczyć o uczuleniu na składniki wyrobu medycznego, wówczas **NALEŻY ZAPRZESTĄĆ STOSOWANIA WYROBU**.
- Nie stosować na rany błony śluzowej nosa.

- Unikać przypadkowego kontaktu wyrobu ze śluzówką oka.
- Nie stosować z innymi preparatami do nosa bez konsultacji z lekarzem.
- Wyrób nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Nie używać, jeśli przed pierwszym otwarciem opakowanie jest uszkodzone lub naruszone.
- W przypadku pogorszenia stanu błony śluzowej nosa, odczuwania dyskomfortu i podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem specjalistą.
- W przypadku nieustąpienia objawów w ciągu 7 dni należy skontaktować się z lekarzem.
- Produkt jest przeznaczony do stosowania pediatrycznego.

W przypadku stosowania u dzieci wymagany jest nadzór rodzica/opiekuna.

## DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Opakowanie wyrobu zawiera butelkę z żelem wraz z instrukcją używania.

Dostępna pojemność wyrobu: 20 ml w szklanej butelce.

## PRZECZYSZCZANIE

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, tj. 15-25 °C.

Chronić przed światłem i źródłami ciepła.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia opakowania bezpośredniego.

Nie stosować po upływie terminu ważności umieszczonym na opakowaniu.

Pusty pojemnik, produkt nieużyty lub przeterminowany należy wyrzucić (podać utylizacji) zgodnie z obowiązującymi zasadami. Wyrób medyczny - nie zawiera substancji szkodliwych dla środowiska.

Działania niepożądane i poważne incydenty dotyczące używania wyrobu medycznego należy zgłaszać na adres producenta/wytwórcy lub dystrybutora.



**WYTWÓRCA**

LABORATOIRE L'IDEAL Parisien Sp. z o.o.  
ul. Ogrodowa 8, 32-064 Niegoszowice  
tel./fax +48 12/283 88 60, [www.lideal.pl](http://www.lideal.pl)



**DYSTRYBUTOR**

TRM sp. z o.o., ul. Wołkowyńska 1/1, 15-107 Białystok  
[www.siogilu.pl](http://www.siogilu.pl)



Informacja na opakowaniu



Wyrób medyczny

## Wskazania wyrobu nie obejmują stosowania w przypadku

**wirusów:** paramyksowirus, ludzki wirus grypy A i adenowirus podtypu B, rinowirus

\* dotyczy wyłącznie wirusów grypy typu B i C oraz koronawirusów

Wydanie B z dnia 03.08.2022 r.